

Citrosteril®



Fresenius Medical Care

Citrosteril®


Środek do termo - chemicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy z zastosowaniem pompy dozującej.

- Wartość pH 1,7 - 2,0
- Rozcieńcza i wypłukuje pozostałości krwi
- Doskonale eliminuje CaCO_3
- Dezynfekuje i dekalcyfikuje
- Złożony ze składników naturalnych
- W 100 % ulega biodegradacji
- Nie toksyczny ($\text{LD}_{50} > 2000 \text{ mg/kg}$)
- Bezwonny
- Nie zawiera - stabilizatorów, środków koloryzujących, środków zapachowych

Citrosteril® 100 g preparatu zawiera:
21,0 g uwodnionego kwasu cytrynowego ($1 \times \text{H}_2\text{O}$), kwas jabłkowy i kwas mlekowy.

- Gwarancja bezpieczeństwa i komfortu podczas stosowania
- Ochrona środowiska naturalnego

■ Cząstki HBV
■ Cząstki HBV zmienione
■ Cząstki HBV zniszczone
■ Cząstki HBV całkowicie rozłożone

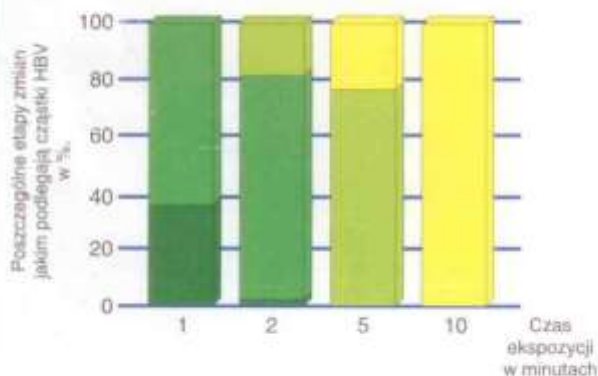

Już po 10 minutach działania **Citrosterilu®** cząstki HBV ulegają całkowitemu rozłożeniu.

Source: Schwalbach, G.: Evaluation of the Hepatitis-B-virucidal action of the chemical disinfectant Citrosteril. Bad Mergentheim, 1991.

Citrosteril® – roztwór 3% stosowany w temperaturze większej niż 60°C działa:

- bakteriobójczo (łącznie z prątkami gruźlicy)
- grzybobójczo
- wirusobójczo (łącznie z HBV, HCV i HIV)
- rozpuszcza krew
- odwapnia

Citrosteril dostępny jest w opakowaniach:
• 5 litrów nr katalogowy F0005857

