

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### NEUTRART® BEZIGŁOWY PORT NEUTRALNY Z PODWÓJNYM PRZEDŁUŻACZEM

#### OPIS


NeutrArt® to jednorazowy zestaw przedłużający przeznaczony do stosowania z urządzeniami dostępu naczyniowego do podawania płynów podczas terapii dożylniej.

Produkt wyposażony jest w bezigłowe porty ze zintegrowaną silikonową membraną, która chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą podczas terapii dożylniej, minimalizując użycie igły.

#### CECHY

- Silikonowy port z barierą mikrobiologiczną, z płaską membraną, zapewniający lepszą dezynfekcję i czas suszenia.
- Przezroczysta obudowa zapewniająca lepszy wgląd w ścieżkę płynu
- Kompatybilny z roztworami TPN (lipidami), lekami krwiopochodnymi i cytostatycznymi
- Umożliwia wielokrotny dostęp.
- Zgodny z normą ISO 80369-7.
- Odpowiedni do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
- Okres przydatności: 5 lat
- Zgodny z MDD 93/42/EEC. Certyfikat WE nr: 1984-MDD-18-524
- Dostępny luzem i pakowany, sterylny.
- Wersje przeznaczone do leków światłoczułych (-PH) są w kolorze bursztynowym
- Nie zawiera lateksu, PCV i DEHP

#### DIAGRAM

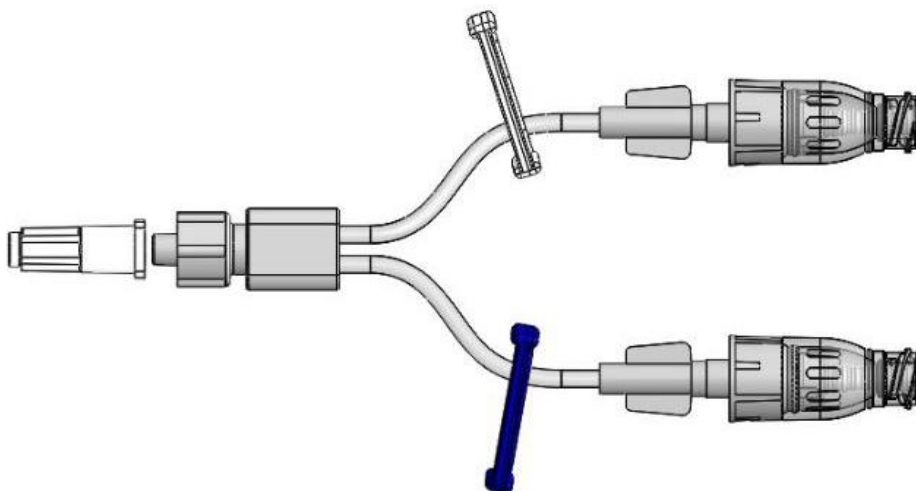

Element	Materiał
Korpus zaworu	Kopoliester
Membrana (septum)	Silikon
Dreny	Poliuretan
Złącze żeńskie Luer	MBS (metakrylan butadien styren)
Złącze męskie Luer Lock	Poliwęglan

## DANE PRODUKTU

Charakterystyka	Specyfikacja	
Kod produktu	A2010N, A2010N-PH	A2010NWOR, A2010NWOR-PH
Nazwa produktu	Bezigłowy port neutralny z podwójnym przedłużaczem	
Objętość wypełnienia (ml)	0,42	0,62
Natężenie przepływu (ml/min przy ciśnieniu wody 1 m)	70	61
Długość (cm)	10	20

## ETYKIETY I PAKOWANIE:

Każda produkt jest oznakowany na blistrze i opakowaniu.

Każdy opakowanie jest oznaczone etykietą zawierającą następujące informacje:

- Ilość
- Opis produktu
- Data produktu
- Numer partii

TDS.121\_Rev05\_07.06.2023

Asset® Medikal Tasarim San. Tic. A.S. is an ISO 13485 registered company, Certificate No.: M 8072.

FlowArt is a registered trademark of Asset Medikal.

Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions.

©2023. All rights reserved.

Asset® Medical International, Inc.

5965 Village Way E105-300  
San Diego, CA 92130, USA

info@assetmedical.com  
www.assetmedical.com

Asset® Medikal Tasarim San. Tic. A.S

İkitelli OSB Mahallesi, 17. Cadde, No:17  
Başakşehir, İstanbul - Türkiye

Phone : +90 212 494 27 27  
Fax : +90 212 494 34 37

**asset**  
NeutrArt® FlowArt® SwabArt® SetArt®